

VIII. 离心管

- 磨砂帽表面，方便贴标签/做标记。
- 管身带刻度，侧面有磨砂书写区。
- 医疗级聚丙烯材质，具有优良的化学稳定性。
- 耐受温度 -80℃~121℃，耐受离心力 14000 Xg。

货号	产品名称	规格
BLD-BS2031006	0.6ml 无色离心管, 锥底, 刻度0.6, 非灭菌	1000个/盒, 10盒/箱
BLD-BS2001015	1.5mL 无色离心管	500个/袋, 1袋/盒, 10盒/箱, 5000个
BLD-BS2001020	2.0mL 无色离心管	500个/包, 10包/箱
BLD-BS2002500	50mL 透明锥底离心管, 灰色平盖, RCF12000xg, 灭菌	25支/包, 20包/箱
BLD-BS2002150	15mL 透明锥底离心管, 灰色平盖, RCF12000xg, 灭菌	25支/包, 20包/箱

百赛®

ABOUT US
关于我们

上海百赛生物技术股份有限公司成立于2005年，是专注于生命科学服务领域的平台型服务商，有29个办事处/分公司，管理超30万种产品类别。百赛以“服务科学”为使命，针对不同科研和生产场景的需求，构建多维度产品矩阵，已与康宁、宝生物、丹纳赫、赛默飞等全球知名企业建立了战略合作伙伴关系，同时与行业内超过20个顶级生命科学品牌保持紧密合作，帮助科研工作者在生命科学的探索中取得更大的进展。百赛成为Takara Bio中国区独家总代理。

百赛有品® 是百赛旗下自主品牌的总称，涵盖实验仪器、耗材、试剂和技术服务四大品类。传承百赛一贯的创新与专注理念，百赛有品® 依托自建供应链与技术服务中心，为全球生命科学研究者提供高品质的一站式实验室解决方案。



II. 样品制备




RIPA裂解液（强，无抑制剂）（R6166）和蛋白酶抑制剂混合液（EDTA-Free，100× in DMSO）（P6163）搭配组合

有效提取细胞、组织、细菌、真菌等多类样本中的全蛋白，包含细胞核、细胞核膜、细胞浆蛋白、细胞核转录因子蛋白等。



BCA 蛋白定量检测试剂盒（即用型）（B6169）搭配中等吸附全透明酶标板（BS6700196）

通过酶标仪检测562nm处的吸光度进行测定蛋白含量。

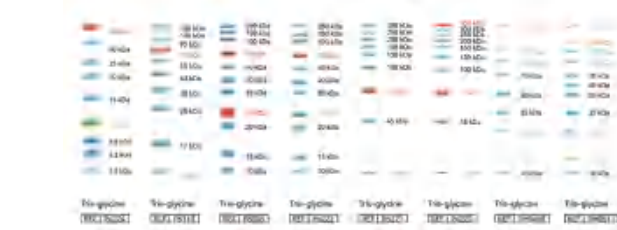

彩色预染蛋白Marker
（P6110/P8028/P6222/P6221/P6220/P6224/PM0409/PM0511）

指示准确：
非预染蛋白标定，条带大小准确。

条带清晰：
条带颜色清晰、明亮，分离效果好。

多色易观察：
色彩明亮，方便观察和后续裁膜。



蛋白垂直电泳槽（VET-1210/1215/1410/1415）

超大容量：
最多可容纳4块手灌胶或预制胶。

人性设计：
灌胶框底部独有超平玻璃支撑，有效避免了玻璃板滑落。

经久耐用：
铂金电极纯度 99.99%；直径 0.25 mm。

赠品丰富：
随机器赠送多用途离心管架和玻璃板支架。

V. 封闭，一抗/二抗孵育



牛血清白蛋白（B7200）



Western Blot 抗体稀释液
（W6173）



全自动蛋白印迹工作站
（auto-WB）

考马斯亮蓝快速染色液（免脱色）（K8006）

操作简单：
电泳完成后，无需固定，无需微波加热，室温即可染色，无需脱色。

超快染色：
5min 即可显色。

灵敏度高：
最低可观察到 5ng 蛋白条带。

背景清晰：
高信/噪比。

绿色环保：
不含甲醇，冰醋酸。



HRP Goat Anti-Mouse IgG（H&L）（HRP羊抗鼠二抗）
（H6161）

III. 蛋白上样



Easy PAGE Quick 一步法彩色快速凝胶制备试剂盒（NS6182-NS6184）

一步快速凝胶：
短时间即可灌制多块凝胶，无需液封

彩色上样，清晰上样：
可制备4种颜色的上层胶，为点样和区分不同凝胶提供便利

条带美观：
凝胶均匀，韧性好，蛋白电泳条带清晰美观，尤其是小分子条带。



Plastic gel 预制胶 Tris-Gly 4~20%，15 孔，1.0mm（PG1008）
GLASS gel 预制胶 Tris-Gly 4~20%，15 孔，1.5mm（PG2012）



PVDF，0.45μm，
265mm*3750mm（PF0045）



Western 免冰浴快速转膜液
（10×）（W6174）



半干转印系统（WB-1000）



蛋白转印槽（TCT-1200/1400）

超大容量：
可同时放置 1~2 个转印夹。

操作灵活：
支持高电流快速转印或低电流过夜转印。

强力冷却：
内置 2 个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量。

经久耐用：
铂金电极纯度 99.99%；直径 0.25 mm。

VI. 显影



ECL化学发光检测试剂盒（NS6009）

高灵敏度：
中飞克到低皮克级检测水平，信号响应线性度优异，可检测NC膜或PVDF膜上低表达或高价值的蛋白条带。

精准发光：
发光背景信号极低，适用非特异抗体检测低丰度的蛋白，长时间曝光下精准显现目前的蛋白信号。

信号持久：
条件优化的情况下，经底物孵育的印迹条带能够持续输出 4~6h的可检测光信号，提高了稳定检测大量实验的灵活。

价格经济：
配方经过优化，可适用于浓度极低的抗体检测。

化学发光成像系统（GE-9500）

清晰成像：
进口高灵敏度冷 CCD 相机，大口径高通透镜头，F0.8 超大光圈，保证微弱信号的捕获，实现最佳成像效果。

一键拍摄：
预览功能，可提前进行预曝光；自动曝光拍摄，只需点击拍摄就可得到完美图片，方便快捷；软件具有图像自动优化功能。

全面分析：
软件具有旋转、反色、裁剪、对比度等一系列图像分析功能，自动计算分子量、OD 值及条带含量，光密度。

安全稳定：
采用耐腐蚀性金属暗箱一体式密封设计，防静电干扰，集成模块化处理器，提高安 全和稳定性。



VII. 通用耗材

吸头末端斜交设计
减少样本残留，增加移液器的精确性

医疗级聚丙烯（PP）材质
具有优良的化学稳定性

耐受温度：-80℃~121℃
可高温灭菌

无DNA酶、无RNA酶、无热原

兼容大多数科研级移液器 | 10μL, 20μL, 200μL, 300μL, 1000μL, 5000μL 可选（详见耗材产品清单）

货号	产品名称	规格
BLD-BS1003010	10μL 透明吸头，盒装，灭菌	96支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱
BLD-BS1003200	200μL 黄色吸头，盒装，灭菌	96支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱
BLD-BS10031ML	1000μL 蓝色吸头，盒装，灭菌	100支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱
BLD-BS1007010	10μL 透明滤芯吸头，盒装，灭菌	96支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱
BLD-BS1007200	200μL 透明滤芯吸头，盒装，灭菌	96支/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱
BLD-BS10071ML	1000μL 透明滤芯吸头，盒装，灭菌	100个/盒, 10盒/大盒, 5大盒/箱
BLD-BS1053010	10μL 透明吸头，低吸附，盒装，灭菌	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
BLD-BS1053200	200μL 透明吸头，低吸附，盒装，灭菌	96支/盒, 10盒/组, 5组/箱
BLD-BS10531ML	1000μL 透明吸头，低吸附，盒装，灭菌	100支/盒, 10盒/组, 5组/箱